




12-Lead Task Trainer to manekin – tors dorosłego mężczyzny do treningu wykonywania zaawansowanego 12-odprowadzeniowego EKG

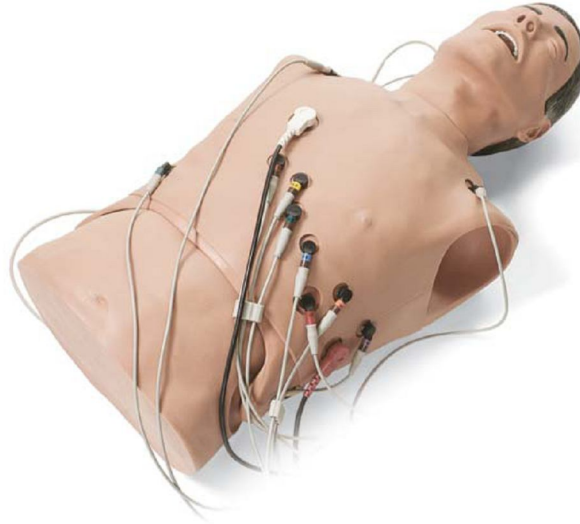

Właściwości manekina:

- możliwość treningu przyrządowych i bezprzyrządowych czynności związanych z drogami oddechowymi:
 - intubacja przez usta i przez nos
 - możliwość osłuchiwania brzucha
- właściwości związane z pracą serca:
 - końcówki do podłączenia odprowadzeń kończynowych (czterech) oraz przedsercowych
 - kompatybilny z większością 12-to-odprowadzeniowych defibrylatorów/monitorów*
 - defibrylacja za pomocą elektrod samoprzylepnych lub łyżek
 - stymulacja z opcją skuteczną/nieskuteczną
 - ręcznie generowane tętno szyjne
 - możliwość uciśnięć klatki piersiowej
 - możliwość realizacji scenariuszy uwzględniających do 5 różnych rytmów zmieniających się w zależności od działań ćwiczącego lub na żądanie

**zestaw nie zawiera defibrylatora/monitora*

260-20001 12-Lead Task Trainer

Zestaw 12-Lead Task Trainer zawiera:

- tors dorosłego mężczyzny z elektroniką
- przewodowy pilot sterujący
- baterie
- żel silikonowy
- bezrękawnik
- torba transportowa
- instrukcja obsługi

Materiały zużywalne:

250-21050 Airway Lubricant
spray silikonowy (45 ml)

