




**AED Little Anne Training System to kompletny system do nauki defibrylacji półautomatycznej.**

**AED Little Anne Training System posiada następujące właściwości:**

- brak zaznaczonych miejsc przyklejenia elektrod defibrylacyjnych zmusza ćwiczącego do zlokalizowania ich na podstawie anatomicznych znaczników budowy klatki piersiowej,
- wmontowane pod skórą manekina czerwone diody potwierdzają prawidłowość umiejscowienia elektrod – jedyny w swoim rodzaju system Laerdal LINK Technology umożliwia aparatowi AED Trainer2 ustalenie czy elektrody zostały poprawnie przyklejone,
- defibrylator treningowy identyfikując nieprawidłowe przyklejenie elektrod informuje o tym i wstrzymuje defibrylację do momentu prawidłowego ich umieszczenia,
- AED Trainer 2 wydaje użytkownikowi takie same polecenia jak prawdziwy defibrylator półautomatyczny (w języku polskim),
- System umożliwia korzystanie z 10 gotowych scenariuszy zdarzeń oraz 3 budowanych za pośrednictwem komputera PC,
- pilot zdalnego sterowania pozwala na ingerowanie w aktualnie realizowany scenariusz oraz sterowanie funkcjami defibrylatora
- Manekin AED Little Anne służy ponadto do treningu w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (posiada wszystkie funkcje manekina Little Anne).

**Manekin AED Little Anne** został zaprojektowany specjalnie z myślą o współpracy z defibrylatorem treningowym **Laerdal AED Trainer 2**

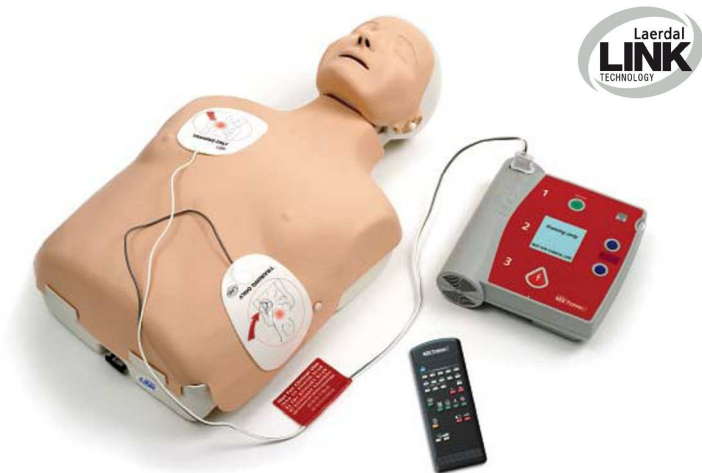

**Dostępne warianty manekina:**

02 00 60 AED Little Anne Training System

02 00 50 AED Little Anne - manekin

**Zestaw zawiera:**

- Laerdal AED Trainer 2 – defibrylator treningowy
- pilot zdalnego sterowania
- Manekin AED Little Anne
- elektrody treningowe Laerdal LINK Training Pads
- torbę transportową / matę treningową
- zapinaną bluzę
- 1 część twarzową
- 1 wymienne drogi oddechowe
- instrukcję obsługi

**Zestaw zawiera:**

- Manekin AED Little Anne
- torbę transportową / matę treningową
- zapinaną bluzę
- 1 część twarzową
- 1 wymienne drogi oddechowe
- instrukcję obsługi

**Materiały zużywalne:**

31 02 10 Face Skin - część twarzowa (op. 6 szt.)

02 03 00 Airways - drogi oddechowe (op. 24 szt.)

02 03 01 Airways - drogi oddechowe (op. 96 szt.)

94 50 90 Laerdal LINK Training Pads - elektrody treningowe

