



Nursing Kelly to manekin o rozmiarach dorosłego mężczyzny przeznaczony do symulacji i ćwiczenia pełnego zakresu czynności pielęgnacyjnych pacjenta. Umożliwia m.in. pielęgnację odleżyn, osłuchiwanie oraz mierzenie ciśnienia dzięki zastosowaniu ramienia do symulacji ciśnienia oraz symulatora czynności życiowych - VitalSim.



Właściwości manekina:

- dokładny anatomicznie manekin dorosłego mężczyzny z kończynami i realistycznymi połączeniami stawowymi
- głowa z anatomicznymi punktami orientacyjnymi, tchawicą, przełykiem, symulowanymi płucami i żołądkiem pozwalająca na naukę procedur:
 - symulowanego płukania oczu i uszu
 - podawania/zakraplania leków do oka, ucha i nosa, włącznie z tamponowaniem nosa
 - pielęgnacji jamy ustnej i protez zębowych
 - wprowadzania zgłębnika i odsysania odcinka gardłowego i krtaniowego dróg oddechowych
 - wprowadzania, zabezpieczania i pielęgnacji rurki tracheotomijnej
 - pielęgnacji tracheotomii i odsysania
 - podawania tlenu
 - płukania żołądka i odżywiania przez zgłębnik
 - wprowadzania / usuwania zgłębnika nosowo-jelitowego i przełykowego oraz ich pielęgnacji
- generowany ręcznie puls w tętnicy szyjnej
- otwory po wkłuciach dożylnych podobojczykowych, różne stomie, otwór w klatce piersiowej po odbarczeniu odmy do pielęgnacji i utrzymania miejsc po ranach operacyjnych
- możliwość wstrzyknięć domięśniowych w mięsień naramienny, grzbietowo-pośladkowy i mięsień obszerny boczny,
- prawe ramię do wstrzyknięć dożylnych z wymienną skórą i napełnianym systemem żylnym pozwalające na obwodowe leczenie dożylne i pielęgnację miejsc wkłuć
 - nakłucie żyły jest możliwe w rowku przedłokciowym i na grzbiecie ręki
 - dostępne żyły: środkowa, odłokciowa i odpromieniowa
- lewe ramię do symulacji i treningu pomiaru ciśnienia (wymagane jest podłączenie do symulatora VitalSim)
- płyta brzuszna z zamiennymi stomiami przedstawiającymi kolostomię, ileostomię i przetokę nadłonową (możliwe stosowanie zestawów do irygacji kolostomii oraz stałych worków kolostomijnych jedno- i dwuczęściowych)
- zamienne genitalia żeńskie i męskie z zaworami przyłączeniowymi, zbiornikiem moczowym i zbiornikiem okrężnicy umożliwiające:
 - pełne cewnikowanie pęcherza moczowego
 - możliwe stosowanie cewników założonych na stałe lub doraźnych
 - procedury lewatywy wykonywane z zastosowaniem płynu do realistycznego zwrotu

Dzięki wykorzystaniu symulatora VitalSim™ manekin Nursing Kelly umożliwia ponadto:

- Nabywanie umiejętności z zakresu kardiologii
- Symulację tonów serca (zsynchronizowane z zaprogramowanym EKG)
- Symulację szmerów płuc (zsynchronizowane z częstością oddechu 0 – 60 /min; ustawiane obustronnie lub oddzielnie dla każdego płuca)
- Symulację odgłosów perystaltyki (normalne i anormalne)
- Symulację ciśnienie krwi / puls
- Symulację odgłosów pacjenta

/zobacz więcej informacji na temat symulatora VitalSim™/





Symulator VitalSim wymagany do pełnego funkcjonowania manekina Nursing Kelly – dostępny osobno

Dostępne akcesoria do manekina Nursing Kelly (opcja):

300-01050 Wound Care and Assessment Set - Male

Zestaw modułów do oceny i pielęgnacji ran obejmujący:

- moduł chirurgicznego cięcia na klatce piersiowej z namalowanymi szwami do nauki opatrywania i pielęgnacji szwu
- moduł nacięcia brzusznego z namalowanymi szwami do nauki opatrywania i pielęgnacji szwu
- moduł nacięcia brzusznego z klamrami i drenem Penrose`a
- moduł cięcia brzusznego ze szwem nylonowym i drenem Penrose`a
- moduł tamponady brzucha przystosowany do suchego i mokrego tamponowania i płukania rany
- moduł podskórnych wstrzyknięć heparyny i insuliny
- zakażona stomia okrężnicy (możliwość płukania)
- moduł brzuszno-pośladkowego i pośladkowego wrzodu odleżynowego do klasyfikacji wrzodów odleżynowych, oczyszczania i opatrywania
- amputacja poniżej kolana, kikut do pielęgnacji
- moduł tamponady uda przystosowany do suchej lub mokrej tamponady i płukania rany
- moduł szwu uda (szew nylonowy)
- moduł opracowania chirurgicznego rany uda
- moduł nogi żylakowatej z owrzodzeniem zastoinowym
- moduł stopy cukrzycowej z gangreną palców i owrzodzeniem odleżynowym pięty

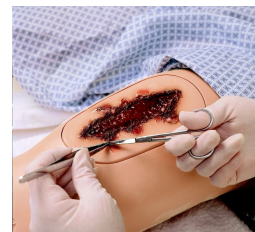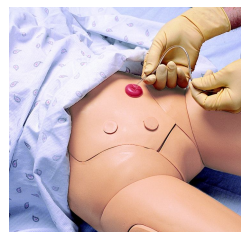

Zestaw Nursing Kelly zawiera:

- Manekin dorosłego mężczyzny – pełna postać
- Manikin Lubricant - środek nawilżający
- ubranie (koszula szpitalna)
- zestaw narzędzi do łączenia części
- instrukcję obsługi

Dostępne warianty manekina (nie zawierają symulatora VitalSim):

300-05050 Nursing Kelly VitalSim (manekin działający z symulatorem VitalSim)

300-20050 Nursing Kelly (manekin nie współpracujący z symulatorem VitalSim)

200-10033 Symulator VitalSim

