




**Resuscytatory The BAG II łączą w sobie wszystkie zalety worków do resuscytacji wielokrotnego użycia z wygodą jaką daje ich jednorazowość. Wszechstronność użycia, uniwersalność i posiadane parametry techniczne sprawiają, że resuscytatory The BAG II mogą być wykorzystywane przez wszystkie służby ratunkowe.**

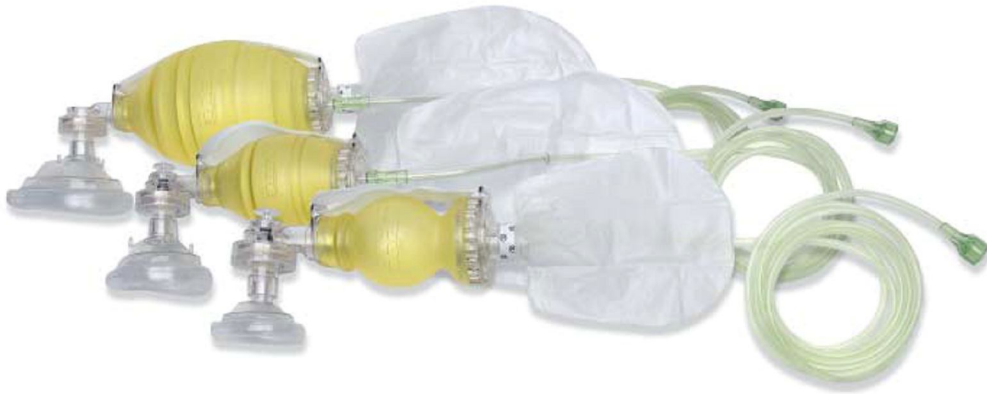


**Właściwości resuscytatorów BAG II:**

- ergonomiczna, transparentna konstrukcja worków daje możliwość dobrego wycucia naturalnego oporu płuc
- możliwość resuscytacji z użyciem tlenu dzięki rezerwuatom tlenowym
- 3 metrowy przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym (nie zamyka przepływu przy zgięciu)
- jednorazowa maska z miękkim, powietrznym mankietem dla lepszej szczelności
- przezroczystość masek umożliwia obserwowanie koloru skóry pacjenta
- regulowany pasek-uchwyt ułatwiający trzymanie resuscytatora zmniejsza zmęczenie dłoni podczas wentylacji
- wersje dla dzieci i niemowląt wyposażone w zawór bezpieczeństwa 35cm H2O
- jednorazowość użycia worka The BAG II pozwala zmniejszyć ryzyko zakażenia krzyżowego
- temperatury użytkowania pomiędzy -18°C a + 50°C
- możliwość zamontowania zastawki PEEP
- niewielkie rozmiary po złożeniu
- doostępną w trzech wersjach:
  - dla dorosłych
  - dla dzieci
  - dla niemowląt

**Zestaw The Bag II zawiera:**

- worek
- maskę
- rezerwuuar tlenu z 3-metrowym przewodem tlenowym
- zawór bezpieczeństwa (tylko wersje dziecięce i niemowlęce)
- instrukcję obsługi

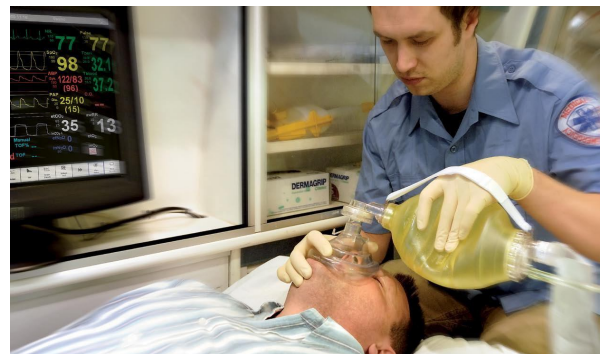

**Dostępne warianty resuscytatorów jednorazowych BAG II:**

84 50 11 Resuscytator The BAG II z maską nr 5 dla dorosłych

84 50 41 Resuscytator The BAG II z maską nr 4 dla dorosłych

84 50 21 Resuscytator The BAG II z gniazdem manometru zaworem bezpieczeństwa 35cm H2O i maską nr 3 dla dzieci

84 50 31 Resuscytator The BAG II z gniazdem manometru, zaworem bezpieczeństwa 35cm H2O i maską nr 1 dla niemowląt

84 50 70 Maska nr jednorazowa 5

84 50 60 Maska nr jednorazowa 4

84 50 50 Maska nr jednorazowa 3



84 50 40 Zastawka PEEP jednorazowa z adapterem

84 50 80 Zawór wydychanego powietrza

